

Crystal-512 Extra

Гарантированное количество вспышек:	200 000 вспышек
Диапазон длины волны:	420-1100 нм
Площадь обрабатываемого участка:	7.5 см ² (15x50 мм)
Частота следования вспышек:	одна вспышка каждые 0.5 секунды
Максимальная развиваемая мощность:	22 Дж/см ²
Насадка:	Универсальная длинноволновая система
Контроль:	жидкокристаллический дисплей (LCD)
Конфигурация:	малогабаритный
Напряжение:	230 В/110 В
Вес:	22 кг
Габариты:	42 x 52 x 26 см



Active

Crystal-512
Extra
Record-618
Classic
Extra-818

Innovation In
Photo-Dermatology

Record-618 Classic

Гарантированное количество вспышек:	200 000 вспышек
Диапазон длины волны:	420-1100 нм
Площадь обрабатываемого участка:	7.5 см ² (15x50 мм)
Частота следования вспышек:	каждые 2 секунды (0,5 или 1 или 2 сек. - Record-618 Optima)
Максимальная развиваемая мощность:	22 Дж/см ²
Насадка:	Универсальная длинноволновая система
Контроль:	широкий жидкокристаллический дисплей (LCD)
Конфигурация:	передвижной (тумба-подставка на колесиках)
Напряжение:	230 В/110 В
Вес:	40 кг (включая тумбу-подставку)
Габариты:	44 x 45 x 100 см



Стандарты безопасности

- CE-MDD - Международный медицинский стандарт
- FDA - стандарт безопасности США
- IEC 601-1 - Медицинский стандарт безопасности
- FCC - Стандарт RFD (на радиочастотные приборы), принятый в США
- CFS - Одобрение министерства здравоохранения
- ISO13485 - Международный сертификат качества медицинских приборов
- ISO9001 - Международный сертификат стандартизации



Active CosMedical Isrsel

ты в Украине: 044 3388083

www.active2001.com.ua

e-mail: active.ukr@gmail.com

УДАЛЕНИЕ ВОЛОС

ПИГМЕНТАЦИЯ

ПРОГРАММЫ ЛЕЧЕНИЯ

КАПИЛЛЯРОВ И СОСУДОВ

ОМОЛАЖИВАНИЕ КОЖИ

АКНЕ



Crystal-512, Record-618 и Extra-818

предназначены для эпиляции и других процедур. Лишние волоски удаляются путем коагуляции волосяных луковиц. Источник света проецирует луч высокой интенсивности на волосяную луковицу и уничтожает ее.

Технология GEM-PL

Geometrical Energy Management

предлагает уникальный способ направить энергию на данную цель. В отличие от других лазерных или фотоэпиляционных (IPL) систем, в которых энергия рассеивается по коже, технология GEM-PL позволяет сконцентрировать большую часть энергии света на геометрической плоскости под поверхностью кожи.

Уникальная технология

“Холодная лампа”

Уникальная технология “Холодная лампа” - специальная конструкция кристалла направляет только нужную часть световой вспышки. Избыточное тепло не нагревает кожу, что делает любую процедуру безболезненной и никогда не приводит к таким осложнениям, как ожог.

Широкий диапазон

в одном - новая универсальная насадка для всех процедур!

Уникальная насадка, контролируемая компьютером, может использоваться для различных целей. Просто переключите программу, и вы сможете эффективно удалять волосы, пигментные пятна, варикозные сетки, угри или увлажнять кожу.

Большой размер светового пятна

Чем больше размер светового пятна, тем выше эффективность и скорость процедуры. Наше световое пятно (7,5 см. кв.) - самое большое на рынке, что обеспечивает эффективное использование энергии и гарантирует безопасность и безболезненность процедуры.

Максимальная

экономическая выгода

Срок службы лампы составляет 200 000 вспышек, в сочетании с большим размером светового пятна позволяет сделать одной манипулой в 4 раза больше процедур чем на других фотосистемах. После выработки ресурса, не нужно покупать новую, дорогостоящую манипулу, меняется только лампа.




Применение Энергии

До



Энергетическая плоскость, созданная GEM
Энергия широкого диапазона способствует притоку крови к фолликулам

После

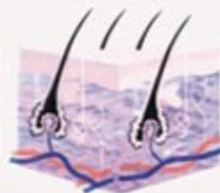

Наши аппараты выполняют 95% процедур востребованных клиентами косметологии.

Быстро - Эффективно - Безболезненно - Доступно
Очень низкие затраты на эксплуатацию!

Эпиляция



Технология GEM-PL позволяет фокусировать большую часть энергии света в месте расположения волосяных луковиц. Широкий спектр частот позволяет работать со всеми типами волос, включая те, которые традиционно трудно поддаются удалению - светлые или пушковые. Вазкулярный компонент спектра направлен на крошечные капилляры, обеспечивающие приток крови к волосяным луковицам.

Пигментация



Соответствующая компьютерная программа объединяет уникальные возможности технологии и нужный спектр для удаления нежелательных дефектов кожи

Омолаживание кожи



Акне



Универсальная насадка аппаратов Crystal-512, Record-618 и Extra-818 идеально подходит для этих целей. Лечение безболезненное, быстрое, и оно основывается на естественных биологических механизмах.